

INSTRUCTIONS FOR USE



RapportTM
PREMIER
IMPOTENCE MANAGEMENT SYSTEM

A Vacuirect Product

 **OWEN MUMFORD**



www.owenmumford.com

UK

Owen Mumford Ltd, Brook Hill, Woodstock,
Oxford OX20 1TU, England
T : 01993 812021 F : 01993 813466
E : info@owenmumford.net

USA

Owen Mumford Inc, 1755-A West Oak Commons Court,
Marietta, Georgia 30062, USA
T : 800-421-6936 F : 770-977-2866
E : info@owenmumfordinc.com

FRANCE

Owen Mumford, BP 444, 27204 Vernon Cedex, France
T : 02 32 51 88 70 F : 02 32 21 96 95
E : owenmumford@compuserve.com

GERMANY


Owen Mumford GmbH, Sternplatz 3,
D-97896 Freudenberg/M, Germany
T : 09375 92990 F : 09375 929929
E : info@owen-mumford.de

EXPORT

Owen Mumford Ltd, Brook Hill, Woodstock,
Oxford OX20 1TU, United Kingdom
T : +44 1993 812021 F : +44 1993 813473
E : export@owenmumford.co.uk

*Rapport Premier V.T.D. is manufactured in South Africa
by Vacurect Manufacturing (Pty) Ltd*

Patent Application Number: PCT/US99/04736



SM/2200/11/0000/02

Contents/Contient/Inhalt

- 4** Risks
- 5** Warnings
- 6-7** How the Rapport Premier Vacuum Therapy Device works
- 8-9** Choosing the correct ring/Using the pump to create an erection
- 10** Cleaning instructions
Device maintenance
- 11** Important precautions
Some special points to remember
- 12** Guarantee

- 14-15** Présentation de l'érecteur à dépression Rapport Premier
- 16-17** Choisir l'anneau qui convient
Comment utiliser Rapport Premier pour obtenir une érection
- 18** Instructions pour le nettoyage
Entretien de l'appareil
- 19** Précautions importantes
Quelques points à ne pas oublier
- 20** Garantie

- 22-23** Funktionsweise des Rapport Premier Vakuumtherapiesystems
- 24-25** Herbeiführen einer Erektion anhand des Rapport Premier Systems
- 26** Anleitung zur Reinigung
Wartung des Systems
- 27** Wichtige Sicherheitsmaßnahmen
Wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten
- 28** Anwendungs-Risiken/Nebenwirkungen
- 29** Warnhinweise
- 30** Garantie

Risks

There are some risks in using a vacuum therapy device.

The most common ones experienced are:

Bruising of the penis. This often happens when you first use the device and can range from small red spots on the skin of the penis up to painful black or blue bruises. This is best avoided by increasing the amount of vacuum pressure slowly when first using the Rapport Premier V.T.D.

Pain in the penis. This can occur when the vacuum pressure is applied. If this does happen, stop pumping immediately and release the pressure using the pressure release valve. If the pain comes back consult your doctor before using the device again.

Warnings

Cautionary Points on the Use of Vacuum Therapy Devices.

- Use the minimum amount of vacuum necessary to achieve an erection. This will prevent bruising.
- Stop drawing vacuum if pain occurs.
- Caution is advised when using a vacuum pump following removal of a penile implant because of possible surgical scarring and subsequent impairment.
- Misuse of a vacuum pump may aggravate already existing medical conditions such as Peyronie's disease, priapism and urethral stricture.
- Use of the vacuum pump may bruise or cause rupture of the blood vessels immediately below the surface of the skin, which may produce hemorrhage or haematoma.
- Do not use the vacuum pump while under the influence of alcohol or drugs.
- If any of the above problems occur, discontinue the use of the vacuum pump and consult your doctor.

How the Rapport Premier Vacuum Therapy Device Works

An erection is created, by drawing blood into the penis by means of a vacuum. The erection is maintained by placing a ring at the base of the penis, which ensures that the blood remains there until the ring is removed.

The ring should be a snug, comfortable fit without being too tight.

The use of the Rapport Premier Vacuum Therapy Device is not intended to replace your doctor's diagnosis of the underlying cause of your impotence, but to help achieve and maintain an erection. It is always best to discuss your individual problem with a doctor before using this treatment.

“Studies have shown that by the use of vacuum devices, in excess of 80% of men are able to achieve a degree of penile tumescence sufficient to allow completion of sexual intercourse.”

The Journal of Sexual Health June 1993 Volume 3 Number 6


Initially it may take some time to familiarise yourself with the Rapport Premier V.T.D., so please take the time to read this instruction booklet and to practice the technique of creating and maintaining the erection, before you attempt sexual intercourse. If you have not had an erection for some time, you may not be able to create one straight away. It may take several practice sessions to achieve an erection for the first time.

If you have not had a firm usable erection for more than one year, you will need to practice even more. With patience and daily practice for 20-30 days you should find success.

The Rapport Premier comes complete with everything you need for immediate use.

The discreet carrying bag contains:

1. Nine individually packaged and numbered rings.
2. A clear durable penile tube.
3. A tube of water soluble lubricating jelly.
4. Bottle of silicone oil.

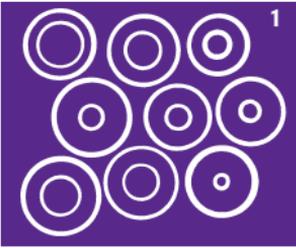

A video presentation is available which shows a demonstration of the Rapport Premier being used to create an erection. The video can be purchased, but is refundable on return against the purchase price of the Rapport Premier V.T.D.

Choosing the correct ring

One of the most important parts of the Rapport Premier V.T.D. is the ring. The ring must encircle the penis and fit comfortably tight. The ring works by retaining the blood in the penis to maintain a firm erection.

First of all, you need to find a ring size that suits you best. Using the card ring sizing guide provided, place your flaccid (non-erect) penis into the slots until you find one which fits the circumference of your penis. Each slot has a ring size marked above it which corresponds to the ring you require, the most common ring size is 18. Please do not choose a ring based on its hole size, use the sizing guide.

Attach the ring to the open end of the penile tube. Then by pressing the lip of the ring against the edge of the tube you will be able to form an airtight seal (*fig. 1*).

Using the pump to create an erection

1. Apply a sufficient amount of water soluble lubricating jelly around the inside rim of the ring and to the penis (this will ensure that the penis slides quickly and smoothly through the ring and does not stick to the side of the penile tube) (*fig. 2*). ***Silicone oil must not be used as it will damage the rings.***

2. Next, hold the penile tube with the lubricated entrance of the ring against the tip of the penis and start pumping slowly by sliding the outer cuff of the penile tube back and forth. ***Please take care not to pump too fast as this may bruise or cause a rupture of the blood vessels immediately below the surface of the skin.*** Initially you will have to do up to 15 full strokes. This will smoothly pull the penis through the ring and into the tube. (You need to do full strokes for maximum efficiency and silent operation) (*fig. 3*).



3. Once the penis has been pulled into the tube, the tube may be firmly pressed against the body. Stop pumping and wait for a full erection to develop.

4. Depending on the initial state of the erection, this will typically take between 30 seconds to 5 minutes.

If a full erection has not developed in 5 minutes a few extra pumping strokes may be required.

5. When a satisfactory erection has been developed the pump may be released by gently squeezing down on the ring, thereby instantly releasing the vacuum. The tube may then be removed, leaving the ring at the base of the penis to maintain the erection.

6. With the ring in place a lasting erection should now be maintained and sexual intercourse can be accomplished.

NOTE: If a condom is to be worn, it should be put on as a last step. Do not wear a condom during the vacuum process.

7. If the penis becomes soft within 5 minutes you need to use a smaller size ring. Work your way down the sizes until you find a ring that is comfortably tight but no tighter than necessary.

8. If more rigidity is required after some use in intercourse, further pumping may be resumed without removing the ring.

Caution - the ring must not be left in place for more than 30 minutes.

Before removing the ring it is recommended that the penis be squeezed firmly for about 10 seconds to reduce the blood pressure in the penis in order to ease removal of the ring. To remove the ring, firmly grip with both hands on the outside rim and then gently pull it away from the body and off the penis (*fig. 4*).



Cleaning Instructions

Clean the pump by hand washing with cold water only so as not to remove the silicone oil from the sliding surfaces too quickly. It should normally be sufficient to wash only the open end surfaces of the pump.

Always ensure the constriction ring is thoroughly cleaned.

Device Maintenance

For continued smooth operation of the pump it is essential that all sliding surfaces and the two O-rings be lightly lubricated about once a month. For this purpose make sure that only pure, plastic friendly silicone oil is used. Only a few drops are required per service.


Bottom O-ring - place 1 drop of silicone oil into each of the 4 notches and then rotate the cuff at least 2 complete turns to distribute the silicone oil evenly around the ring.

Top O-ring - look for the arrow marked midway down the device. At this point add 2 drops of silicone oil down inside the cuff so that it drips onto the O-ring. Rotate the cuff at least 2 complete turns to distribute the silicone oil evenly around the ring.

Additional silicone oil may be added to the outer surfaces to prevent scratching but only a few drops are required.

Do not use the wrong oil as this may result in stickiness and/or build up of dirt and eventual malfunction of the product. Replacement oil can be purchased separately from Owen Mumford.

Never use the enclosed silicone oil or any petroleum based oil on the rings as this will cause permanent damage to the rings.

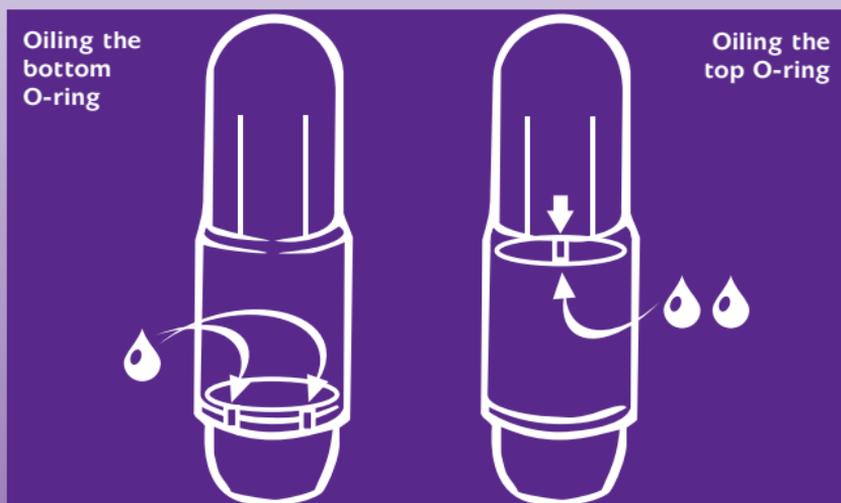

Do not damage or scratch any of the sealing surfaces since this will drastically reduce the pump efficiency.

Take care not to damage the screw threads.

Store in a dark, dry place.

Important Precautions

Never wear the ring for more than 30 minutes.

Never over pump. The user should always apply only the minimum amount of vacuum necessary to achieve a satisfactory erection. If you experience pain when you use the pump release the vacuum by removing the tube from the ring. The device has been designed to limit the vacuum to about 0.57 bar, which is considered a safe maximum value. The typical operating vacuum is approximately 0.4 bar which should be reached within about 15 to 20 full strokes.

Do not wear the ring whilst under the influence of drugs or alcohol.

Do not risk falling asleep whilst wearing the ring.

Owen Mumford will not be liable for any misuse of this product because a user failed to read and comprehend the instructions.

Some Special Points to Remember

We recommend that the first few times you use the Rapport Premier V.T.D. that you do not make the penis any harder than necessary. The penis may not be used to that amount of pressure, size and hardness. Increase the firmness of your erection gradually.

With the ring in place the penis may have a bluish colour and the head may appear larger than normal. Do not be alarmed, this is normal when the penis is filled with blood which is contained by the ring.

Remember whilst wearing the ring ejaculation does not necessarily occur as heavily as normal.

You can obtain a second erection, but you must make sure you wait at least 60 minutes between uses of the ring.

Warranty

The Rapport Premier V.T.D. is covered by a guarantee (excluding rings, water soluble lubricating jelly and oil).

Please ensure you fill in the date of purchase on the guarantee below.

In the unlikely event of a part failure, return the part to Owen Mumford quoting the Lot Number and date of purchase from the guarantee.

G U A R A N T E E

Rapport Impotence Management System

CODE No: SM2200

The Rapport Premier V.T.D. is covered by a guarantee (excluding the rings, water soluble lubricating jelly and oil).

Please keep this safely. If you need to contact us for any reason you must quote the Lot Number and date of purchase to validate this guarantee.

Date of Manufacture.....

Lot Number.....

Date of purchase.....



MODE D'EMPLOI

Présentation de l'érecteur à dépression Rapport Premier

Rapport Premier produit une érection par aspiration du sang dans le pénis à l'aide d'une pompe à vide. L'érection est ensuite maintenue par la pose d'un anneau de constriction, qui empêche le reflux du sang.

Il est toujours conseillé de parler de vos difficultés personnelles avec un médecin.

“Les études ont démontré que l'utilisation des érecteurs à dépression permet à plus de 80% des hommes d'obtenir une rigidité du pénis suffisante pour permettre les rapports sexuels.”

The Journal of Sexual Health. Juin 1993. Volume 3. Numéro 6.

Prenez le temps de lire ces quelques pages et de vous entraîner à obtenir et à maintenir une érection avant d'entreprendre des rapports sexuels. Si vous n'avez pas eu d'érection depuis un certain temps, quelques essais seront peut-être nécessaires avant de parvenir à un résultat.

Rapport Premier est livré prêt à l'emploi dans une trousse discrète qui contient :

1. Neuf anneaux emballés séparément et numérotés.
2. Un tube pénien transparent.
3. Un tube de gel lubrifiant hydrosoluble.
4. Un flacon d'huile silicone.



Choisir l'anneau qui convient

L'anneau maintient l'érection en empêchant le sang de refluer.

Essayez différentes tailles en commençant par la plus grande. Diminuez jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient. L'anneau adapté doit être confortable sans être trop serré. Vous pouvez choisir entre neuf tailles différentes.

Si l'érection ne se maintient pas de façon satisfaisante, vous devrez utiliser un anneau plus petit.

Si l'anneau semble trop serré, utilisez une plus grande taille la fois suivante et vérifiez si l'érection se maintient avec cette taille.

Fixez l'anneau à l'extrémité ouverte du tube pénien en l'emboîtant sur le bord du tube (fig. 1). Pour plus de facilité, vous pouvez poser l'anneau sur une table et emboîter le tube dessus.

Comment utiliser Rapport Premier pour obtenir une érection

1. Appliquez le gel lubrifiant hydrosoluble dans l'orifice de l'anneau et sur le pénis. Ceci permettra au pénis de glisser rapidement et facilement dans l'anneau, et de ne pas coller à la paroi du tube (fig. 2). *L'huile silicone ne doit pas être utilisée car elle endommagerait les anneaux.*

2. Tenez le tube pénien en maintenant l'orifice lubrifié de l'anneau contre la tête du pénis et commencez à pomper doucement en faisant glisser d'avant en arrière le manchon extérieur du tube pénien (fig. 3). Ceci aspirera doucement le pénis dans le tube, en passant à travers l'anneau. Pour obtenir les meilleurs résultats, effectuez le mouvement de pompage dans toute son amplitude. Ne pompez pas trop rapidement car ceci pourrait rompre les petits vaisseaux sanguins qui se trouvent juste sous la surface de la peau.



3. Une fois que le pénis est entièrement introduit dans le tube, ce dernier peut être appuyé fermement contre le corps. Arrêtez de pomper et attendez qu'une érection complète se produise. Cela prendra plus ou moins de temps en fonction de l'état initial de l'érection.

Si l'érection obtenue n'est pas suffisamment ferme, il est possible de re-pomper un peu.

4. Lorsque vous avez obtenu une érection satisfaisante, le tube peut être retiré, laissant ainsi l'anneau à la base du pénis pour maintenir l'érection.

5. Lorsque l'anneau est en place, l'érection est maintenue et permet d'avoir un rapport sexuel.

Note: Si vous voulez utiliser un préservatif, il faudra le mettre quand l'érection sera obtenue et l'anneau en place. Le préservatif ne doit pas être mis pendant le pompage et l'aspiration.

6. Si l'érection ne se maintient pas de façon satisfaisante, vous devrez utiliser un anneau plus petit. Diminuez la taille de l'anneau jusqu'à ce que vous trouviez celui qui serre suffisamment, sans être douloureux.

7. S'il cela s'avère nécessaire, il est possible d'améliorer la rigidité du pénis durant le rapport sexuel. Il vous suffit de ré-embroîter le tube sur l'anneau, sans le retirer du pénis, et de recommencer à pomper.

Attention: ne laissez pas l'anneau en place plus de 30 minutes.

8. Pour enlever l'anneau, étirez-le légèrement vers l'extérieur, le sang pourra ainsi refluer et votre pénis retrouvera sa flaccidité. Tenez ensuite fermement l'anneau à deux mains par le rebord. Tirez doucement pour sortir votre pénis de l'anneau (fig.4).



Instructions pour le nettoyage

Nettoyez la pompe en la lavant à la main avec de l'eau tiède, sans l'immerger, de manière à ne pas retirer l'huile silicone des surfaces coulissantes. Ne lavez que les surfaces de la pompe accessibles sans démontage.

Le démontage de la pompe est totalement déconseillé : celui-ci retire le bénéfice de la garantie.

Veillez à ce que l'anneau de constriction soit toujours bien propre. Lavez-le dans de l'eau savonneuse. Séchez-le bien avant de le ranger dans son sachet plastique.

Entretien de l'appareil

Pour que votre appareil fonctionne longtemps, il est essentiel que toutes les surfaces coulissantes et les deux joints toriques soient légèrement lubrifiés. Utilisez exclusivement une huile silicone pure adaptée au plastique. Seules quelques gouttes sont nécessaires à chaque entretien.

Joint torique inférieur: déposez 1 goutte d'huile silicone dans chacune des 4 encoches, puis faites tourner le manchon sur deux tours complets de manière à bien répartir l'huile silicone autour du joint.

Joint torique supérieur: Déposez deux gouttes d'huile silicone à l'intérieur du manchon (au niveau de la flèche) de manière à ce qu'elles descendent sur le joint torique. Faites ensuite tourner le manchon sur deux tours complets de manière à bien répartir l'huile silicone autour du joint.

N'utilisez pas une huile mal adaptée qui pourrait coller et/ou accumuler des impuretés et causer le mauvais fonctionnement de l'appareil. De nouveaux flacons d'huile peuvent être obtenus auprès d'Owen Mumford.



N'utilisez jamais l'huile silicone fournie ni de la vaseline sur les anneaux, car ceci pourrait les endommager définitivement.

Veillez à ne pas endommager et à ne rayer aucune des surfaces car cela réduirait considérablement l'efficacité de la pompe.

Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.

Précautions importantes

Ne portez jamais l'anneau pendant plus de 30 minutes.

Ne vous endormez pas avec l'anneau en place.

Ne portez pas l'anneau si vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue.

Si vous ressentez une douleur pendant que vous utilisez la pompe, annulez le vide créé en retirant le tube de l'anneau.

Owen Mumford ne pourra être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation de ce produit si l'utilisateur n'a pas lu ou compris ces instructions.

Quelques points à ne pas oublier

Lors des premières utilisations de Rapport Premier, nous vous recommandons de ne pas essayer d'obtenir une érection très rigide. Le pénis ne sera pas habitué à ce genre de pression, de taille et de dureté. Augmentez progressivement la rigidité de votre érection.

Il est possible qu'une fois l'anneau en place, le pénis prenne une couleur bleutée et que la tête semble plus grosse que normalement. Ne vous inquiétez pas : l'érection est maintenue par l'anneau qui empêche le sang de refluer, ceci provoque quelquefois cette coloration.

Lorsque vous portez l'anneau, l'éjaculation n'est pas forcément aussi puissante qu'habituellement. Il se peut que vous ayez une éjaculation rétrograde (le sperme ne s'évacue pas et repart dans la vessie). Ce n'est pas un problème mais néanmoins, si cela vous ennuie, vous pouvez étirer l'anneau par ses anses au moment d'éjaculer.

Vous pouvez obtenir une seconde érection, mais vous devrez attendre au moins une heure avant de réutiliser l'anneau.

Garantie

Rapport Premier est garanti 1 an à compter de la date d'achat (hormis les anneaux, le gel lubrifiant hydrosoluble et l'huile silicone).

Notez la date d'achat sur le bon de garantie ci-dessous.

En cas de mauvais fonctionnement, contactez Owen Mumford en mentionnant le Numéro de lot ainsi que sa date d'achat.

G A R A N T I E

***Valable 1 an à compter de la date d'achat
Érecteur à dépression Rapport PREMIER***

Code No : SM2200

Rapport Premier est couvert par une garantie (hormis les anneaux, le gel lubrifiant hydrosoluble et l'huile silicone).

Veuillez garder cette garantie dans un endroit sûr. Si vous avez besoin de nous contacter, vous devrez mentionner le Numéro de Lot ainsi que la date d'achat pour valider cette garantie.

Date de fabrication

Numéro de lot.....

Date d'achat.....



GEBRAUCHSANLEITUNG

Funktionsweise des Rapport Premier Vakuumtherapiesystems

Eine Erektion wird herbeigeführt, indem mittels eines Vakuums, d.h. eines Unterdrucks, Blut in den Penis gezogen wird. Die Erektion wird aufrechterhalten, indem ein Ring an der Penisschwanzwurzel auf den Penis aufgesetzt wird, der sicherstellt, dass das Blut solange im Penis verbleibt, bis der Ring wieder entfernt wird.

Der Ring sollte zwar enganliegend und gut, aber bequem (also nicht zu eng) sitzen.

Die Verwendung des Rapport Premier Vakuumtherapiesystems ist nicht als Ersatz für eine ärztliche Diagnose der zugrundeliegenden Ursache Ihrer Impotenz gedacht, sondern soll Ihnen helfen, eine Erektion zu erreichen und diese aufrecht zu erhalten. Am Besten ist es, wenn Sie Ihr persönliches Problem mit Ihrem Arzt besprechen, bevor Sie diese Behandlungsmethode anwenden.

„Studien haben gezeigt, daß die Verwendung von Vakuumsystemen es über 80% der Männer ermöglicht, einen Penisschwellungsgrad zu erreichen, der ausreichend für die Durchführung des Geschlechtsverkehrs ist.“

The Journal of Sexual Health, Juni 1993, Band 3, Nummer 6

Anfangs kann es etwas Zeit benötigen, bis Sie sich mit dem Rapport Premier Vakuumsystem vertraut gemacht haben. Nehmen Sie sich also bitte die Zeit, um diese Anleitung durchzulesen und die Technik zum Einleiten und Aufrechterhalten der Erektion zu üben, bevor Sie versuchen, Geschlechtsverkehr zu haben. Falls Sie schon längere Zeit keine Erektion mehr hatten, wird es Ihnen nicht sofort gelingen, eine Erektion herbeizuführen. Möglicherweise müssen Sie mehrmals üben, bis Sie eine Erektion erreichen.

Falls Sie schon seit mehr als einem Jahr keine feste, einsatzfähige Erektion hatten, ist sogar noch etwas mehr Übung nötig. Mit Geduld und täglichem Üben sollten Sie über einen Zeitraum von 20 bis 30 Tagen Erfolg haben.

Das Rapport Premier Vakuumsystem enthält alles, was Sie zum sofortigen Einsatz brauchen.

Die diskrete Tragetasche enthält folgendes:

1. Neun einzeln verpackte und nummerierte Ringe
2. Ein durchsichtiges, robustes Penisrohr
3. Eine Tube wasserlösliches Gleitgel
4. Eine Flasche Silikonöl.



Eine Videopräsentation, die zeigt, wie das Rapport Premier System zum Herbeiführen einer Erektion verwendet wird, ist erhältlich. Die Videokassette können Sie käuflich erwerben; der Kaufpreis kann bei Rückgabe mit dem Kaufpreis des Rapport Premier Vakuumsystems verrechnet werden.

Wahl der richtigen Ringgröße

Einer der wichtigsten Bestandteile des Rapport Premier Systems ist der Ring. Der Ring muss den Penis umschließen und eng, aber bequem anliegen. Durch den Ring wird das Blut im Penis gestaut, wodurch eine feste Erektion gewährleistet wird.

Zuerst müssen Sie einen Ring finden, der Ihnen am besten passt. Mit der beigefügten Schablone lässt sich diese leicht herausfinden. Plazieren Sie die auf der Schablone vorhandenen Einbuchtungen über den erschlafften, nicht erigierten Penis. Die am besten passende Einbuchtung entspricht dann dem Umfang Ihres Penis. Jede Einbuchtung ist mit einer Ringgröße versehen. Diese zeigt Ihnen die benötigte Ringgröße an. Die am häufigsten verwandte Ringgröße ist 18. Bitte wählen Sie keinen Ring aufgrund der Ringgröße aus. Verwenden Sie dazu immer die beigefügte Schablone.

Bringen Sie den Ring am offenen Ende des Penisrohrs an. Wenn Sie nun den Rand des Rings gegen den Rand des Rohrs drücken, erhalten Sie einen luftdichten Abschluss (Abb. 1).

Herbeiführen einer Erektion anhand des Rapport Premier Systems

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des wasserlöslichen Gleitgels um den inneren Rand des Rings herum und auf den Penis auf (damit stellen Sie sicher, daß der Penis rasch und problemlos durch den Ring gleitet und nicht am Rand des Penisrohrs kleben bleibt) (Abb. 2). **Verwenden Sie dazu auf keinen Fall das Silikonöl, da dies den Ring beschädigen würde.**

2. Halten Sie nun das Penisrohr mit der mit Gleitmittel bestrichenen Öffnung des Rings an die Spitze des Penis und fangen Sie langsam an zu pumpen, indem Sie die äußere Manschette des Penisrohrs vor und zurück schieben. *Pumpen Sie dabei nicht zu schnell, da dies zu Beschädigungen oder zum Platzen von direkt unter der Haut liegenden Blutgefäßen führen kann.* Anfangs müssen Sie bis zu 15 vollständige Pumpbewegungen durchführen. (Vollständige Pumpbewegungen, d.h. hin und zurück, sind erforderlich, um höchste Wirksamkeit und geräuschlose Verwendung des Systems zu erreichen.) (Abb. 3).



3. Sobald der Penis in das Rohr hineingezogen ist, muß das Rohr fest gegen den Körper gedrückt sein. Hören Sie auf zu pumpen und warten Sie, bis sich die vollständige Erektion einstellt.

4. Je nach anfänglichem Zustand der Erektion dauert dies normalerweise zwischen einer halben Minute und 5 Minuten.

Haben Sie nach 5 Minuten noch keine vollständige Erektion, müssen Sie eventuell noch mehr pumpen.

5. Wenn eine zufriedenstellende Erektion erreicht ist, kann die Pumpe gelöst werden, indem Sie vorsichtig auf den Ring drücken, wodurch der Unterdruck sofort aufgehoben wird. Dann können Sie das Rohr entfernen, wobei der Ring an der Peniswurzel bleibt und somit die Erektion aufrecht erhält.

6. Während der Ring an Ort und Stelle ist, sollte die Erektion aufrecht erhalten bleiben. Nun kann der Geschlechtsverkehr erfolgen.

HINWEIS: Wenn Sie ein Kondom benutzen wollen, sollten Sie dies erst zum Schluß tun. Das Kondom darf nicht vor der Erzeugung des Unterdrucks auf den Penis aufgesetzt werden.

7. Sollte der Penis innerhalb von 5 Minuten erschlaffen, brauchen Sie eine kleinere Ringgröße. Fangen Sie mit der größten Größe an und probieren Sie der Reihe nach die kleineren Größen durch, bis Sie einen Ring finden, der bequem und eng sitzt, aber nicht enger als nötig.

8. Wenn Sie nach einiger Zeit währen des Geschlechtsverkehrs eine festere Erektion benötigen sollten, dann können Sie die Vakuumpumpe wieder aufsetzen und noch etwas mehr pumpen, ohne den Ring zu entfernen.

Warnhinweis: Der Ring darf nicht länger als 30 Minuten auf dem Penis bleiben.

Vor dem Abnehmen des Rings empfiehlt es sich, den Penis ca. 10 Sekunden lang fest zu drücken, um den Blutdruck im Penis zu verringern, damit der Ring leichter abzunehmen ist. Zum Abnehmen des Rings ergreifen Sie den äußeren Rand des Rings fest mit beiden Händen und ziehen Sie ihn vorsichtig vom Körper weg und vom Penis herunter (Abb. 4).



Anleitung zur Reinigung

Reinigen Sie die Pumpe, indem Sie sie von Hand mit kaltem Wasser waschen, um zu verhindern, daß sich das Silikonöl zu rasch von den Gleitflächen abwäscht. Normalerweise reicht es aus, die offenen Flächen der Pumpe zu waschen.

Stellen Sie immer sicher, daß der Konstriktionsring gründlich gereinigt wird.

Wartung des Systems

Um den störungsfreien Betrieb der Pumpe über längere Zeit zu gewährleisten, müssen alle Gleitflächen und die zwei O-Ringe ca. einmal monatlich leicht geschmiert werden. Zu diesem Zweck darf ausschließlich reines, den Kunststoff nicht angreifendes Silikonöl verwendet werden. Pro Wartung sind nur wenige Tropfen Öl erforderlich.

Unterer O-Ring: Geben Sie jeweils einen Tropfen Silikonöl in jede der vier Kerben und drehen Sie die Manschette mindestens zweimal ganz um ihre Achse, um das Öl gleichmäßig um den Ring herum zu verteilen.

Oberer O-Ring: Suchen Sie zunächst den in der Mitte der Pumpe markierten Pfeil. Geben Sie hier zwei Tropfen Silikonöl in die Manschette, so daß es auf den O-Ring tropft. Drehen Sie die Manschette nun mindestens zweimal ganz um ihre Achse, um das Silikonöl gleichmäßig um den Ring herum zu verteilen.

Eventuell können Sie zusätzlich etwas Silikonöl auf die äußeren Flächen geben, um ein Zerkratzen zu vermeiden, aber dafür sind nur wenige Tropfen nötig.

Verwenden Sie auf keinen Fall das falsche Öl, da es sonst zum Verkleben und/oder zur Ansammlung von Schmutz und schließlich zur Funktionsstörung des Produkts kommen kann. Das Öl ist separat von Owen Mumford erhältlich.



Verwenden Sie nie das mitgelieferte Silikonöl oder ein anderes Öl auf Petroleumgrundlage (z.B. Vaseline) für die Ringe, da dies die Ringe dauerhaft beschädigt.

Beschädigen oder zerkratzen Sie keine der Dichtungsflächen, da sich sonst die Wirksamkeit der Pumpe drastisch verringert.

Achten Sie darauf, die Gewinde nicht zu beschädigen.

Bewahren Sie das System an einem dunklen und trockenen Ort auf.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Tragen Sie den Ring nie länger als 30 Minuten.

Pumpen Sie nie zu lange. Sie sollten immer nur so viel Unterdruck anwenden, um eine zufriedenstellende Erektion zu erreichen, nie mehr. Treten beim Verwenden der Pumpe Schmerzen auf, heben Sie den Unterdruck auf, indem Sie das Rohr vom Ring abnehmen. Das System ist so ausgelegt, daß der Unterdruck auf einen maximalen Wert von 0,57 bar begrenzt ist, was als sicherer Höchstwert betrachtet wird. Der typische Betriebsunterdruck beträgt ca. 0,4 bar und sollte mit ca. 15 bis 20 vollständigen Pumpbewegungen zu erreichen sein.

Tragen Sie den Ring nie unter Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluß.

Gehen Sie nie das Risiko ein, beim Tragen des Rings einzuschlafen.

Owen Mumford übernimmt keine Haftung für eine mißbräuchliche Verwendung dieses Produkts durch Anwender, die die Anleitung nicht gelesen und verstanden haben.

Wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten

Wir empfehlen, den Penis nicht steifer als nötig zu machen, wenn Sie das Rapport Premier System die ersten paar Male verwenden. Der Penis ist möglicherweise nicht so viel Druck, Umfang und Steifheit gewöhnt. Sie können dann im Laufe der Zeit allmählich eine immer festere Erektion erzeugen.

Wenn der Ring auf dem Penis sitzt, kann der Penis bläulich sein und die Eichel größer als normal erscheinen. Machen Sie sich keine Sorgen, dies ist normal, wenn der Penis mit Blut gefüllt ist, das durch den Ring im Penis gestaut wird.

Denken Sie daran, daß der Samenerguß beim Verwendung des Rings normalerweise weniger umfangreich ist als sonst.

Sie können auch eine zweite Erektion herbeiführen, müssen aber unbedingt mindestens 60 Minuten warten, bevor Sie den Ring zum zweiten Mal verwenden.

Anwendungs-Risiken/Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Vakuum Erektionshilfen können Anwendungsrisiken bestehen.

Zu den bekanntesten gehören:

Quetschungen am Penis. Sie können auftreten, wenn das Gerät zum erstenmal verwendet wird. Dies kann von leichten roten Flecken auf der Penishaut bis hin zu schmerzhaften schwarzen oder dunklen Flecken führen. Sie lassen sich am besten vermeiden, indem man beim ersten Gebrauch des Rapport Premier V.D.T. den Vakuumdruck nur langsam erhöht.

Schmerzen im Penis. Diese können auftreten, wenn das Vakuum aufgebaut wird. Wenn dies passiert, hören Sie sofort auf zu pumpen und lassen über das Druckablassventil Druck ab. Wenn der Schmerz wiederholt auftritt, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut einsetzen.

Es können sich Hämatome bilden. Hierbei handelt es sich um Quetschungen, verursacht durch Unterhautblutungen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn alle Anzeichen einer Quetschung vollständig verschwunden sind. Wenn diese erneut auftreten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Falscher Gebrauch der Ringe. Die Ringe sind sicher, wenn sie sachgemäß verwendet werden, verbleiben sie jedoch länger als 20-30 Minuten auf dem Penis, können sie bleibende Schäden verursachen, da sie den Blutzufuhr hemmen.

Bleibende Verletzungen des Penis. Diese können nur auftreten, wenn die Pumpe unsachgemäß verwendet wird und eine Schwellung des Penis bewirkt oder wenn sich der bereits existierende medizinische Zustand verschlimmert. Dies wird nicht passieren, wenn die Bedienungsanweisung genau befolgt wird.

Warnhinweise

Vorsichtsmaßnahmen, die beim Gebrauch der Vakuumerrektionshilfe zu befolgen sind:

- Setzen Sie nur den Mindestdruck ein, der zur Erlangung einer Erektion erforderlich ist. Damit beugen Sie Quetschungen vor.
- Erhöhen Sie den Vakuumdruck nicht weiter, wenn Sie Schmerzen verspüren. Lassen Sie über das Druckablassventil Druck ab.
- Es wird zur Vorsicht geraten, wenn eine Vakuumpumpe nach Entfernen eines Penisimplantats benutzt wird, Operationsnarben vorhanden sind und eine nachfolgende Beeinträchtigung auftreten kann.
- Der unsachgemäße Gebrauch der Vakuumpumpe kann zu einer Verschlechterung des bereits bestehenden medizinischen Zustandes führen, wie z.B. Penisinduration, Priapismus oder Harnröhrenverengung.
- Der Gebrauch der Vakuumpumpe kann zu gequetschten oder eingerissenen Blutgefäßen, die sich unmittelbar unter der Hautoberfläche befinden, führen. Diese können Blutungen oder Hämatome verursachen.
- Durch den Gebrauch der Vakuumpumpe können Schwellungen oder Abschnürungen der Blutgefäße, die sich unmittelbar unter der Hautoberfläche befinden, hervorgerufen werden. Dabei kann es zu Blutungen oder Hämatomen kommen.
- Benutzen Sie die Vakuumpumpe nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen/Medikamenten stehen.
- Die Vakuumpumpe schützt nicht vor Schwangerschaft. Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchsinformation der Verhütungsmittel weiterhin zu befolgen.

Garantie

Auf das Rapport Premier Vakuumsystem wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt (davon ausgeschlossen sind die Ringe, das wasserlösliche Gleitgel und das Öl).

Tragen Sie bitte das Kaufdatum in das Garantiefeld ein, das Sie am Ende dieser Anleitungsbroschüre finden.

Im unwahrscheinlichen Falle eines Versagens von Produktteilen senden Sie die entsprechenden Teile unter Angabe der Chargenbezeichnung und des Kaufdatums (siehe Garantie) an Owen Mumford ein.

G A R A N T I E

Rapport System zur Therapie der Impotenz

CODE Nr.: SM2200

Auf das Rapport Premier Vakuumsystem wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt (davon ausgeschlossen sind die Ringe, das wasserlösliche Gleitgel und das Öl).

Bewahren Sie diese Garantie sicher auf. Wenn Sie sich aus irgend einem Grund an uns wenden wollen, müssen Sie uns die Chargenbezeichnung und das Kaufdatum mitteilen, um die Gültigkeit der Garantie zu bestätigen.

Herstellungsdatum.....

Chargenbezeichnung.....

Kaufdatum.....



R I N G S I Z I N G G U I D E

Select a slot which fits firmly around the base of your non-erect penis (closest to your body). Try the larger slots first.
Please remember these sizes are only intended as a guide.

14-16

16-20

18-22

22-24

24-28

